

# EASY CARE

APD装置

# イージーケア

自然落差式

自動プライミング

シンプルな  
自然落差式  
サイクラー

運転音が静か

小型軽量

簡単操作

## 睡眠中の腹膜透析を サポートします。

- ポンプ不要の自然落差式注排液システムで運転音が静か。
- 治療準備の基本操作は順次、画面で確認できます。
- 専用回路は小型カセット式で装置本体に差し込むだけ。
- 透析液と専用回路をセットしたら治療開始まで、スタートボタンを2回押すだけ。
- ヒーター保温機能により透析液を適温で注液します。
- 2社の腹膜透析メーカーの透析液に対応。

・高度管理医療機器  
・特定保守管理医療機器



APD装置

# イージーケア

自然落差式注排液システムで、快適にAPD療法。

本体サイズ



イージーケアチュービングセットのカセットを装置本体へ差し込むだけ

イージーケア治療パターン例


[例1]

最終排液工程では残液を排液するための時間延長機能を選択できます。




[例2]

最終注液工程では透析液の濃度変更が可能。  
(注液して治療終了の場合)

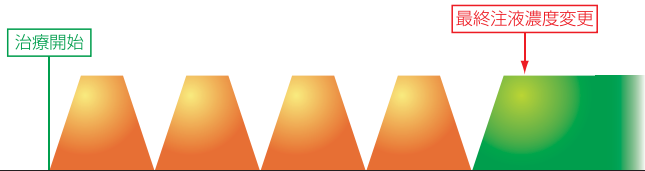

[例3]

最終注液工程では注液量を変更できます。

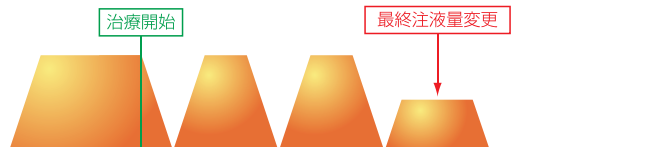

●ポータブル型自動腹膜灌流装置イージーケアの仕様

本体寸法	幅 14.3cm × 奥行 18.4cm × 高さ 8.6cm	電源	AC100V
占有寸法	床 48cm × 48cm / 高さ 91cm	電源入力	200VA
総重量	10.3kg		

●イージーケア関連製品

製品名	製品番号	分野名	構成・分類	包装	承認番号
ポータブル型自動腹膜灌流装置 イージーケア	-	-	-	1	21200BZY00250000
イージーケアチュービングセット	EC-5LDW	腹膜透析液交換セット	回路・APDセット	30	21200BZY00251000
	EC-5LLDW				
	EC-5TDW				
	EC-5TTDW				
CAPD QC キャップ	QC100	腹膜透析液交換セット	交換キット	30	20400BZY00128000
CAPD QC 接続チューブ ロングライフ	QT-008C	腹膜透析用接続チューブ	-	1	

外国製造所

 **Medionics International Inc.**  
Markham, Ontario, Canada

製造販売元

 株式会社 **林寺メディノール**  
金沢市笠舞本町2丁目26番7号



発売元

 株式会社 **ハヤシデラ**

金沢市石引4丁目5番4号  
URL <http://www.hayashidera.com>

TEL (076) 222-8311 FAX (076) 222-8341

■資料、カタログ等の詳細は当社までご請求ください。  
■メールでのお問い合わせは、E-mail : [capd@hayashidera.com](mailto:capd@hayashidera.com)